Инструкция
ReNu MultiPlus® 360ml

BAUSCH + LOMB

4122B 4122BL

ReNu®

MultiPlus

Раствор универсальный ReNu® MultiPlus для ухода за мягкими контактными линзами, в составе: 1. Раствор универсальный ReNu® MultiPlus для ухода за мягкими контактными линзами, флакон объемом 360 мл – 1 шт; 2. Контейнер для контактных линз - 1 шт.: 3. Инструкция по применению - 1 шт.[1]

[1] далее по тексту Раствор универсальный ReNu MultiPlus

Назначение

Раствор универсальный **ReNu MultiPlus** предназначен для ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения всех типов мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями офтальмолога или оптометриста.

Описание и функциональные характеристики

Раствор универсальный **ReNu MultiPlus** предназначен для ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями офтальмолога или оптометриста. Раствор поставляется стерильным во флаконе, с контейнером для контактных линз Bausch + Lomb, который представляет собой нестерильный полипропиленовый корпус дугообразной формы с двумя параллельными отделениями и крышками с маркировкой левой и правой сторон.

Состав и Технические характеристики

Прозрачный, бесцветный, стерильный, изотонический водный раствор (pH 7.2, осмоляльность 300 мОсм/кг), в состав которого входит HYDRANATE™ (гидроксиалкилфосфонат 0,03%), борная кислота, динатрия эдетат (0,1%), полоксамин, натрия борат и натрия хлорид, консервант DYMED™ (полиаминопропил бигуанид 0,0001 %), при необходимости - гидроксид натрия или соляная кислота (для регулирования pH).

Механизм действия и клиническая эффективность

При правильном применении Раствор универсальный **ReNu MultiPlus:** обеспечивает очистку путем растворения белковых отложений, размягчает и удаляет пленку, загрязнения и накопления с мягких контактных линз; препятствует образованию раздражающих отложений на поверхности линз; производит дезинфекцию путем уничтожения вредных микроорганизмов на линзах; может применяться для промывания, увлажнения/ополаскивания линз перед использованием, а также для их хранения до 30 дней.

Показания

Продукт показан к применению пользователями мягких (гидрофильных) контактных линз для их ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения.

Пользователи и целевая группа пациентов

Продукт может использоваться независимо от пола, возраста и этнической принадлежности при отсутствии противопоказаний к применению. Продукт предназначен для использования

потребителями (пациентами, лицами, осуществляющими за ними уход/опекунами) по назначению офтальмологов или оптометристов.

Противопоказания (показания к неприменению)

Противопоказано применение при наличии аллергической реакции на любой компонент в составе продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, ГЛАЗНОЙ ИНФЕКЦИИ И/ИЛИ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ (СЛЕПОТЫ).

Чтобы обеспечить правильное применение линз и средств по уходу за ними, в том числе контейнера для линз, необходимо соблюдать рекомендации офтальмолога или оптометриста, а также все инструкции производителя.

Глазные заболевания, в т. ч. язвы роговицы, могут быстро прогрессировать и вызвать потерю зрения (слепоту). Контактные линзы для дневного ношения предназначены для использования в период бодрствования и их не следует использовать во время сна. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что риск серьезных нежелательных явлений увеличивается при использовании данных линз во время сна. Линзы для длительного ношения необходимо регулярно снимать для очистки и дезинфекции или для утилизации и замены согласно рекомендациям офтальмолога или оптометриста. Клинически доказано, что среди пользователей контактных линз для длительного ношения наблюдается более высокая частота серьезных нежелательных явлений по сравнению с теми, кто использует контактные линзы для дневного ношения. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что риск серьезных нежелательных явлений повышается с увеличением времени использования линз для длительного ношения до их снятия для очистки и дезинфекции или утилизации и замены. Исследования также показали, что среди курильщиков отмечается повышенная частота нежелательных явлений. В случае возникновения дискомфорта в глазах, обильного слезотечения, изменений остроты зрения и/или покраснения глаз немедленно снимите линзы и безотлагательно обратитесь к офтальмологу или оптометристу. Для обеспечения здоровья глаз регулярно обращайтесь к офтальмологу или оптометристу.

Меры предосторожности

- Не используйте, если защитное кольцо на горлышке флакона сломано или отсутствует.
- Не используйте после даты окончания срока годности.
- Всегда сливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Когда флакон не используется, храните его плотно закрытым.
- Утилизируйте оставшийся раствор через 90 дней после вскрытия флакона.
- Храните в недоступном для детей месте.

Предупреждения

- Для эффективной дезинфекции контактных линз и снижения риска их загрязнения тщательно соблюдайте рекомендованное время механической очистки и промывания, указанное в инструкции к продукту. Сокращение времени механической обработки или промывания может быть недостаточным для эффективной очистки линз.
- Запрещается использовать для дезинфекции контактных линз воду, физиологический раствор и увлажняющие капли. Эти жидкости не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз. Если не соблюдать рекомендации по использованию дезинфицирующего средства, это может стать причиной тяжелой инфекции, потери зрения или слепоты.
- Если не удалять использованный раствор из контейнера для линз после каждого применения, доливать новый раствор к старому или использовать воду для ухода за линзами, это может привести к загрязнению, повреждению глаз и даже потере зрения.
- Запрещается хранить контактные линзы в воде или любом нестерильном растворе, а также промывать этими жидкостями контейнер для линз. Во избежание загрязнения линз и контейнера для них следует использовать только свежий универсальный раствор. Применение нестерильного раствора может вызвать тяжелую инфекцию, потерю зрения или слепоту.

• Если применять универсальный раствор после истечения срока его годности, это может привести к загрязнению раствора и стать причиной тяжелой инфекции, потери зрения или слепоты.

Важная информация по безопасности

• Всегда следуйте инструкциям по применению продукта. Их несоблюдение может привести к потере зрения (слепоте).
• Регулярно проходите осмотры у офтальмолога или оптометриста.
• Всегда мойте руки с мылом и вытирайте руки насухо перед тем, как брать контактные линзы.
• Не очищайте линзы и контейнер водопроводной, бутилированной водой или слюной.
• Для очистки и дезинфекции контактных линз используйте только свежий раствор.
• Физиологический раствор и увлажняющие капли не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз.
• Следует всегда заменять раствор, линзы и контейнер в соответствии с указаниями.
• Во избежание загрязнения не прикасайтесь кончиком флакона ни к каким предметам. Закрывайте крышку флакона после каждого применения.
• Не подходит для использования с термической (тепловой) дезинфекцией.
• Безопасность борной кислоты и бората натрия в концентрациях, содержащихся в данном офтальмологическом средстве, подтверждена оценкой безопасности при условии соблюдения инструкции по применению.

Нежелательные явления (проблемы и действия)

Необходимо учитывать, что могут возникнуть приведенные ниже проблемы.
• Жжение, резь, зуд (раздражение) или другие болевые ощущения в глазах.
• Уменьшение комфорта по сравнению с первым использованием линз.
• Неприятное ощущение инородного тела, или как от царапины на поверхности глаза.
• Обильное слезотечение или необычные глазные выделения.
• Покраснение глаз.
• Снижение остроты зрения (нечеткое зрение).
• Затуманенное зрение, появление радужных кругов или ореолов вокруг предметов.
• Светочувствительность (светобоязнь).
• Сухость глаз.

При появлении любого из указанных выше симптомов необходимо немедленно снять линзы.
Если проблема или неприятные ощущения не исчезнут, внимательно осмотрите линзу.
• Если линза повреждена, не надевайте ее повторно. Положите линзу в контейнер и обратитесь к офтальмологу или оптометристу.
• При наличии на линзе грязи, ресницы или другого инородного тела, или если неприятные ощущения прошли, и линза не имеет видимых повреждений, тщательно очистите, промойте и продезинфицируйте линзу, после чего ее можно будет снова использовать.
Если проблема сохраняется, немедленно извлеките линзу и проконсультируйтесь с офтальмологом или оптометристом.
Возникновение любого из вышеперечисленных явлений может быть признаком серьезного нарушения, включая инфекцию, язву роговицы, неоваскуляризацию или ирит. Для предотвращения серьезного поражения глаз немедленно обратитесь за профессиональной диагностикой и лечением. Собираясь к офтальмологу или оптометристу для осмотра на предмет потенциальной глазной инфекции, не забудьте взять с собой линзы, растворы и контейнер для линз, чтобы можно было провести бактериологический посев для более точной идентификации микроорганизмов.

Указания по использованию

Для очистки, удаления белковых отложений и дезинфекции линз следуйте простым инструкциям по применению раствора универсального **ReNu MultiPlus.** Перед первым использованием контейнера для контактных линз необходимо тщательно промыть сам контейнер и его крышки свежим универсальным раствором.
ШАГ 1. Нанесите не менее 3 капель универсального раствора на каждую сторону линзы и осторожно потрите в течение 20 секунд.

ШАГ 2. Тщательно промойте линзы с каждой стороны в течение 5 секунд универсальным раствором.
ШАГ 3. Поместите очищенные контактные линзы в контейнер для линз и залейте свежим универсальным раствором. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. Всегда используйте свежий раствор и обязательно сливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

Чтобы обеспечить правильное применение линз и средств по уходу за ними, в том числе контейнера для линз, необходимо соблюдать рекомендации офтальмолога или оптометриста, а также все инструкции производителя.
Обязательно консультируйтесь с офтальмологом или оптометристом, прежде чем переходить на другой универсальный раствор, или если у вас есть вопросы по поводу состояния глаз.
Не предназначено для использования в режиме термической дезинфекции.

Смачивание и хранение линз

• Всегда наполняйте контейнер для контактных линз новой порцией раствора после каждого использования. Не доливайте и не используйте старый раствор повторно.
• Утилизируйте использованный раствор сразу после извлечения контактных линз из контейнера.
• Не используйте водопроводную, бутилированную, дистиллированную воду и нестерильные растворы для хранения и промывания контактных линз и контейнера для них.
• Храните контактные линзы в герметично закрытом контейнере, если вы не планируете их сразу использовать.
Линзы можно хранить в закрытом контейнере до момента использования в течение максимум 30 дней.
При хранении контактных линз более 30 дней перед тем, как их надеть, очистите и продезинфицируйте их с использованием свежего Раствора универсального **ReNu MultiPlus.**

Уход за контейнером для линз

• После каждого использования контактных линз выполняйте очистку, ополаскивание и воздушную сушку контейнера для их хранения. Пока контейнер для контактных линз сохнет, переверните его для лучшего стекания излишков раствора.
• Обновляйте контейнер для контактных линз не реже одного раза в 3 месяца либо в соответствии с указаниями офтальмолога или оптометриста. Контейнеры для контактных линз могут быть средой для размножения микроорганизмов.

Правила гигиены при уходе за линзами

• Всегда мойте руки с мылом и вытирайте руки насухо перед тем, как брать контактные линзы.
• Очищайте, ополаскивайте и дезинфицируйте контактные линзы после каждого использования.
• Всегда первой берите одну и ту же контактную линзу (правую или левую), чтобы их не перепутать.

Взаимодействие с водой

• Не допускайте попадания воды на контактные линзы во время их использования.
• Обратитесь к офтальмологу или оптометристу за советом касательно использования контактных линз во время занятий, предусматривающих контакт с водой.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

• Храните, транспортируйте и используйте раствор при температуре от + 1 °С до + 30 °С.
• Не замораживайте раствор.
• Не используйте после даты окончания срока годности, указанной на картонной пачке и флаконе.
• Утилизируйте оставшийся раствор через 90 дней после вскрытия флакона.

Срок годности

2 года для закрытой упаковки с раствором, срок годности после вскрытия флакона - 90 дней.

Условия утилизации

Продукт необходимо утилизировать в соответствии с локальными нормативными требованиями.

Для Российской Федерации утилизация изделия осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21:
- упаковка и изделие относятся к медицинским отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

	Производитель
	Стерилизовано с использованием асептической технологии обработки
	Система с одинарным стерильным барьером и с защитной упаковкой снаружи
	Не используйте, если упаковка повреждена, и обратитесь к инструкции по применению
	Содержит опасные вещества
	Предел температуры
	Код партии
	Номер модели
	Страна производства
	Использовать до
	Медицинское изделие
	Знак соответствия продукции, подлежащей сертификации

Рег № МИ: ФСЗ 2007/00771 (ЕРУЛ Г004-00110-00/02937256)



Производитель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед, США
Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester, NY 14609 USA

Manufactured by (Место производства):
Bausch & Lomb - Iom Spa, Via Pasubio 34,
Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy
(Италия).

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «Бауш Хелс», Россия, 115093, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н,
тел: + 7 495 510 2879,
e-mail: Russia.Claims@bausch.com

Поставщик / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в Республике Беларусь:
ООО «БАУШ ХЕЛС», Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 22,
тел. +375 17 397 44 22

Инструкция
ReNu MultiPlus® 100ml

ReNu® MultiPlus

Раствор универсальный ReNu® MultiPlus для ухода за мягкими контактными линзами[1]

1 далее по тексту Раствор универсальный ReNu MultiPlus

Назначение

Раствор универсальный **ReNu MultiPlus** предназначен для ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения всех типов мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями офтальмолога или оптометриста.

Описание и функциональные характеристики

Раствор универсальный **ReNu MultiPlus** предназначен для ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями офтальмолога или оптометриста. Раствор поставляется стерильным во флаконе, с контейнером для контактных линз Bausch + Lomb, который представляет собой нестерильный полипропиленовый корпус дугообразной формы с двумя параллельными отделениями и крышками с маркировкой левой и правой сторон.

Состав и Технические характеристики

Прозрачный, бесцветный, стерильный, изотонический водный раствор (pH 7.2, осмоляльность 300 мОсм/кг), в состав которого входит HYDRANATE™ (гидроксиалкилфосфонат 0,03%), борная кислота, динатрия эдетат (0,1%), полоксамин, натрия борат и натрия хлорид, консервант DYMED™ (полиаминопропил бигуанид 0,0001 %).

Механизм действия и клиническая эффективность

При правильном применении Раствор универсальный **ReNu MultiPlus:** обеспечивает очистку путем растворения белковых отложений, размягчает и удаляет пленку, загрязнения и накопления с мягких контактных линз; препятствует образованию раздражающих отложений на поверхности линз; производит дезинфекцию путем уничтожения вредных микроорганизмов на линзах; может применяться для промывания, увлажнения/ополаскивания линз перед использованием, а также для их хранения до 30 дней.

Показания

Продукт показан к применению пользователями мягких (гидрофильных) контактных линз для их ежедневной очистки, удаления белковых отложений, промывания, химической (нетермической) дезинфекции и хранения.

Пользователи и целевая группа пациентов

Продукт может использоваться независимо от пола, возраста и этнической принадлежности при отсутствии противопоказаний к применению. Продукт предназначен для использования потребителями (пациентами, лицами, осуществляющими за ними уход/опекунами) по назначению офтальмологов или оптометристов.

Противопоказания (показания к неприменению)

Противопоказано применение при наличии аллергической реакции на любой компонент в составе продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, ГЛАЗНОЙ ИНФЕКЦИИ И/ИЛИ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ (СЛЕПОТЫ). Чтобы обеспечить правильное применение линз и средств по уходу за ними, в том числе контейнера для линз, необходимо соблюдать рекомендации офтальмолога или оптометриста, а также все инструкции производителя.

Глазные заболевания, в т. ч. язвы роговицы, могут быстро прогрессировать и вызвать потерю зрения (слепоту). Контактные линзы для дневного ношения предназначены для использования в период бодрствования и их не следует использовать во время сна. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что риск серьезных нежелательных явлений увеличивается при использовании данных линз во время сна. Линзы для длительного ношения необходимо регулярно снимать для очистки и дезинфекции или для утилизации и замены согласно рекомендациям офтальмолога или оптометриста. Клинически доказано, что среди пользователей контактных линз для длительного ношения наблюдается более высокая частота серьезных нежелательных явлений по сравнению с теми, кто использует контактные линзы для дневного ношения. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что риск серьезных нежелательных явлений повышается с увеличением времени использования линз для длительного ношения до их снятия для очистки и дезинфекции или утилизации и замены. Исследования также показали, что среди курильщиков отмечается повышенная частота нежелательных явлений. В случае возникновения дискомфорта в глазах, обильного слезотечения, изменений остроты зрения и/или покраснения глаз немедленно снимите линзы и безотлагательно обратитесь к офтальмологу или оптометристу. Для обеспечения здоровья глаз регулярно обращайтесь к офтальмологу или оптометристу.

Меры предосторожности

- Не используйте, если защитное кольцо на горлышке флакона сломано или отсутствует.
- Не используйте после даты окончания срока годности.
- Всегда сливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

• Когда флакон не используется, храните его плотно закрытым.
• Утилизируйте оставшийся раствор через 90 дней после вскрытия флакона.
• Храните в недоступном для детей месте.

Предупреждения

• Для эффективной дезинфекции контактных линз и снижения риска их загрязнения тщательно соблюдайте рекомендованное время механической очистки и промывания, указанное в инструкции к продукту. Сокращение времени механической обработки или промывания может быть недостаточным для эффективной очистки линз.
• Запрещается использовать для дезинфекции контактных линз воду, физиологический раствор и увлажняющие капли. Эти жидкости не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз. Если не соблюдать рекомендации по использованию дезинфицирующего средства, это может стать причиной тяжелой инфекции, потери зрения или слепоты.
• Если не удалять использованный раствор из контейнера для линз после каждого применения, доливать новый раствор к старому или использовать воду для ухода за линзами, это может привести к загрязнению, повреждению глаз и даже потере зрения.
• Запрещается хранить контактные линзы в воде или любом нестерильном растворе, а также промывать этими жидкостями контейнер для линз. Во избежание загрязнения линз и контейнера для них следует использовать только свежий универсальный раствор. Применение нестерильного раствора может вызвать тяжелую инфекцию, потерю зрения или слепоту.
• Если применять универсальный раствор после истечения срока его годности, это может привести к загрязнению раствора и стать причиной тяжелой инфекции, потери зрения или слепоты.

Важная информация по безопасности

• Всегда следуйте инструкциям по применению продукта. Их несоблюдение может привести к потере зрения (слепоте).
• Регулярно проходите осмотры у офтальмолога или оптометриста.
• Всегда мойте руки с мылом и вытирайте руки насухо перед тем, как брать контактные линзы.
• Не очищайте линзы и контейнер водопроводной, бутилированной водой или слюной.
• Для очистки и дезинфекции контактных линз используйте только свежий раствор.
• Физиологический раствор и увлажняющие капли не обеспечивают надлежащую дезинфекцию линз.
• Следует всегда заменять раствор, линзы и контейнер в соответствии с указаниями.
• Во избежание загрязнения не прикасайтесь кончиком флакона ни к каким предметам. Закрывайте крышку флакона после каждого применения.
• Не подходит для использования с термической (тепловой) дезинфекцией.
• Безопасность борной кислоты и бората натрия в концентрациях, содержащихся в данном офтальмологическом средстве, подтверждена оценкой безопасности при условии соблюдения инструкции по применению.

Нежелательные явления (проблемы и действия)

Необходимо учитывать, что могут возникнуть приведенные ниже проблемы.
• Жжение, резь, зуд (раздражение) или другие болевые ощущения в глазах.
• Уменьшение комфорта по сравнению с первым использованием линз.
• Неприятное ощущение инородного тела, или как от царапины на поверхности глаза.
• Обильное слезотечение или необычные глазные выделения.
• Покраснение глаз.
• Снижение остроты зрения (нечеткое зрение).
• Затуманенное зрение, появление радужных кругов или ореолов вокруг предметов.
• Светочувствительность (светобоязнь).
• Сухость глаз.

При появлении любого из указанных выше симптомов необходимо немедленно снять линзы.
Если проблема или неприятные ощущения не исчезнут, внимательно осмотрите линзу.
• Если линза повреждена, не надевайте ее повторно. Положите линзу в контейнер и обратитесь к офтальмологу или оптометристу.
• При наличии на линзе грязи, ресницы или другого инородного тела, или если неприятные ощущения прошли, и линза не имеет видимых повреждений, тщательно очистите, промойте и продезинфицируйте линзу, после чего ее можно будет снова использовать.
Если проблема сохраняется, немедленно извлеките линзу и проконсультируйтесь с офтальмологом или оптометристом.
Возникновение любого из вышеперечисленных явлений может быть признаком серьезного нарушения, включая инфекцию, язву роговицы, неоваскуляризацию или ирит. Для предотвращения серьезного поражения глаз немедленно обратитесь за профессиональной диагностикой и лечением. Собираясь к офтальмологу или оптометристу для осмотра на предмет потенциальной глазной инфекции, не забудьте взять с собой линзы, растворы и контейнер для линз, чтобы можно было провести бактериологический посев для более точной идентификации микроорганизмов.

Указания по использованию

Для очистки, удаления белковых отложений и дезинфекции линз следуйте простым инструкциям по применению раствора универсального **ReNu MultiPlus.** Перед первым использованием контейнера для контактных линз необходимо тщательно промыть сам контейнер и его крышки свежим универсальным раствором.
ШАГ 1. Нанесите не менее 3 капель универсального раствора на каждую сторону линзы и осторожно потрите в течение 20 секунд.
ШАГ 2. Тщательно промойте линзы с каждой стороны в течение 5 секунд универсальным раствором.
ШАГ 3. Поместите очищенные контактные линзы в контейнер для линз и залейте свежим универсальным раствором. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. Всегда используйте свежий раствор и обязательно сливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

Чтобы обеспечить правильное применение линз и средств по уходу за ними, в том числе контейнера для линз, необходимо соблюдать рекомендации офтальмолога или оптометриста, а также все инструкции производителя. Обязательно консультируйтесь с офтальмологом или оптометристом, прежде чем переходить на другой универсальный раствор, или если у вас есть вопросы по поводу состояния глаз.
Не предназначено для использования в режиме термической дезинфекции.

Смачивание и хранение линз

• Всегда наполняйте контейнер для контактных линз новой порцией раствора после каждого использования. Не доливайте и не используйте старый раствор повторно.
• Утилизируйте использованный раствор сразу после извлечения контактных линз из контейнера.
• Не используйте водопроводную, бутилированную, дистиллированную воду и нестерильные растворы для хранения и промывания контактных линз и контейнера для них.
• Храните контактные линзы в герметично закрытом контейнере, если вы не планируете их сразу использовать.
Линзы можно хранить в закрытом контейнере до момента использования в течение максимум 30 дней.
При хранении контактных линз более 30 дней перед тем, как их надеть, очистите и продезинфицируйте их с использованием свежего Раствора универсального **ReNu MultiPlus.**

Уход за контейнером для линз

• После каждого использования контактных линз выполняйте очистку, ополаскивание и воздушную сушку контейнера для их хранения. Пока контейнер для контактных линз сохнет, переверните его для лучшего стекания излишков раствора.
• Обновляйте контейнер для контактных линз не реже одного раза в 3 месяца либо в соответствии с указаниями офтальмолога или оптометриста. Контейнеры для контактных линз могут быть средой для размножения микроорганизмов.

Правила гигиены при уходе за линзами

• Всегда мойте руки с мылом и вытирайте руки насухо перед тем, как брать контактные линзы.
• Очищайте, ополаскивайте и дезинфицируйте контактные линзы после каждого использования.
• Всегда первой берите одну и ту же контактную линзу (правую или левую), чтобы их не перепутать.

Взаимодействие с водой

• Не допускайте попадания воды на контактные линзы во время их использования.
• Обратитесь к офтальмологу или оптометристу за советом касательно использования контактных линз во время занятий, предусматривающих контакт с водой.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

• Храните, транспортируйте и используйте раствор при температуре от + 1°C до + 30 °C.
• Не замораживайте раствор.
• Не используйте после даты окончания срока годности, указанной на картонной пачке и флаконе.
• Утилизируйте оставшийся раствор через 90 дней после вскрытия флакона.

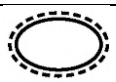
Срок годности

2 года для закрытой упаковки с раствором, срок годности после вскрытия флакона - 90 дней.

Условия утилизации

Продукт необходимо утилизировать в соответствии с локальными нормативными требованиями.
Для Российской Федерации утилизация изделия осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21:
- упаковка и изделие относятся к медицинским отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

	Производитель
	Стерилизовано с использованием асептической технологии обработки

	Система с одинарным стерильным барьером и с защитной упаковкой снаружи
	Не используйте, если упаковка повреждена, и обратитесь к инструкции по применению
	Содержит опасные вещества
	Предел температуры
	Код партии
	Номер модели
	Дата изготовления
	Использовать до
	Медицинское изделие
	Знак соответствия продукции, подлежащей сертификации

Рег № МИ (Номер ЕРУЛ) Yxxx-xxxxx-xx/xxxxxxxx



Производитель: Бауш энд Ломб
Инкорпорейтед, США.

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester, NY 14609 USA

Manufactured by (Место производства):
Bausch & Lomb - Iom Spa, Via Pasubio 34,
Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy
(Италия).

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «Бауш Хелс», Россия, 115093, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н,
тел: + 7 495 510 2879, e-mail: Russia.Claims@bausch.com

Поставщик / организация, уполномоченная на принятие претензий
от потребителей в Республике Беларусь:
ООО «БАУШ ХЕЛС», Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 22, тел. +375 17 397 44 22